

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**




BLUNIX®60

mała myjnia-dezynfektor



Myjnia-dezynfektor

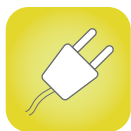

BLUNIX®60

optymalna efektywność czyszczenia

detergent w saszetce

Wygodne stosowanie i wymiana detergentów

Kilka rodzajów detergentów w zależności od właściwości czyszczonych przedmiotów

Gwarantowana moc czyszczenia poprzez wstrzyknięcie dokładnej ilości detergentów



wygodna obsługa

Łatwy w obsłudze panel LCD

Łatwy do monitorowania przebieg procesu, w tym pozostały czas i temperatura itp.

Regulowany czas trwania procesu w zależności od środowiska użytkownika



maksymalna wydajność wewnątrz komory

Komora o dużej pojemności (do 63 litrów)

Wbudowany górny i dolny wirnik zapewniający dokładne czyszczenie

Wysoka trwałość dzięki stali nierdzewnej SUS304



regulowane nóżki



system pamięci USB



automatyczna blokada

szybkie czyszczenie

Szybkie czyszczenie w ciągu 24 min

Niski koszt i wysoka wydajność przy szybkim czyszczeniu

kompaktowe rozmiary

45 cm szerokości i 63 cm wysokości

Łatwy montaż i użytkowanie na ograniczonej przestrzeni



BLUNIX®60

wymiary zewnętrzne	SxGxW: 450 x 560 x 630 mm
waga	50 kg
wymiary komory	SxGxW: 380 x 380 x 440 mm
pojemność / typ komory	63l / prostokątna
detergent	enzym alkaliczny/ enzym neutralny; pojemność 500ml; typ- saszetka
program	standardowy- 4, specjalny- 2 (dostępne programy niestandardowe)
czas mycia	normalny- 24 min; przedłużony - 44 min (bez dezynfekcji i suszenia)
temperatura	mycie: 40~50°C; płukanie: 35~45°C; dezynfekcja: <93°C
suszarka	metoda: suszenie gorącym powietrzem
drzwi	drzwi pojedyncze, sterowanie ręczne
wyświetlacz	ekran- alfanumeryczny wyświetlacz LCD; alarm dźwiękowy i wizualny
zasilanie / natężenie prądu	230V, 50Hz / 15A
inne elementy	dwie pompy cyrkulacyjne o wydajności ~100l/min

Akcesoria do BLUNIX®60

wózki



wózek podstawowy

SxGxW: 360x359x42 mm



wózek do kątnic

SxGxW: 360x366x82 mm
ø15 ~ø17, ø19 ~ø21



wózek iniekcyjny
do drenów

SxGxW: 360x366x42 mm

kosze, tace



taca podstawowa

SxGxW: 310x310x50 mm



koszyk na przyrządy

SxGxW: 143x306x192 mm



kosz pionowy

SxGxW: 149x306x162 mm (duży)
SxGxW: 111x306x162 mm (mały)



stojak na dreny

SxGxW: 244x244x182




taca siatkowa

SxGxW: 143x303x58 mm



kosz na tacki

SxGxW: 143x303x83 mm

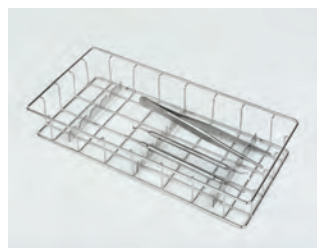

kosz siatkowy

SxGxW: 142x303x38

detergenty



środek enzymatyczny (pH neutralne)

500ml, typ- saszetka

eśrodek enzymatyczny (alkaliczny)

500ml, typ- saszetka

Urządzenia Blunix są produkowane przez firmę RENOSEM Co., Ltd., Korea



Niniejsza broszura nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych, właściwych przepisów prawnych. Informacje w niej zawarte służą celom informacyjnym.

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu