

Fotele ginekologiczne IVY



Parametry techniczne:

- IVY - 3 3 silniki elektryczne (podnoszenie/opuszczanie, regulacja oparcie, regulacja podnóżka)
- IVY - 2 2 silniki elektryczne (podnoszenie/opuszczanie, regulacja oparcia), sterowanie podnóżkiem ręczne
- IVY - 1 1 silnik elektryczny (podnoszenie/opuszczanie), oparcie i podnóżek sterowane ręcznie
- Regulacja wysokości siedziska 540-910mm
- Podłokietniki z pianki poliuretanowej
- Waga 105 kg
- Nośność 180 kg
- Stojak na kroplówkę z 2 haczykami
- Uchwyt na rolkę papieru
- Bateria (opcja)
- Zestaw pamięci pozycji przycisku (opcja)
- Uchwyt kolposkopu (opcja)
- Podpórka pod udo z przegubem i blokadą (opcja)
- Para wyścielanych ochroniaczy na uda (opcja)
- Podpórka pod piętę teleskopowa model RING (opcja)





Serii foteli IVY została zaprojektowana do zastosowań ginekologicznych i urologicznych. Tradycyjny fotel ginekologiczny z poręcznymi i funkcjonalnymi ruchami, zapewniający optymalny komfort pacjenta. Liczne możliwości regulacji w zależności od rodzaju konfiguracji pacjenta

Dzięki minimalnej wysokości siedziska od podłoża (540mm) jest łatwy w użyciu nawet w diagnostyce pacjentów otyłych i starszych. Konstrukcja z wysokiej jakości stali całkowicie pomalowana proszkiem epoksydowym o właściwościach antybakteryjnych. Odsuwane i zdejmowane podłokietniki, siedzisko, oparcie i noga są tapicerowane materiałem ognioodpornym klasy 1 IM Sky, antybakteryjnym, przeciwegrybicz, dezynfekowalnym i odpornym na zużycie. Standardowe wyposażenie obejmuje miskę zbierającą płyn ze stali nierdzewnej, pedał sterujący do elektrycznego zarządzania podnośnikiem i przycisk sterujący (dla wersji z 2/3/4 silnikami elektrycznymi). Podstawa jest zamocowana na podłodze i pokryta ochronną obudową z tworzywa ABS.

IVY to doskonały wybór dla każdego gabinetu ginekologicznego i urologicznego, łączący nowoczesny design z funkcjonalnością i komfortem.

A.	160 mm
B.	380 mm
C.	580 mm
D.	690÷880 mm
E.	1080 mm
F.	540÷910 mm
G.	1650 mm
H.	910 mm

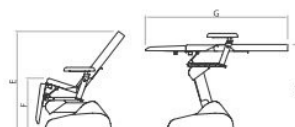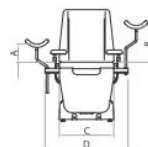

Videomed ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

www.videomed.eu info@videomed.eu tel. 748432829 / 508349875