

Nawilżacz Oddechowy

DEAS
Hydraltis
9500FM




Autoryzowany przedstawiciel
i serwis w Polsce



Gumowane elastyczne złącza

Brak przecieków oraz idealna izolacja elektryczna zwiększająca bezpieczeństwo podczas użytkowania.

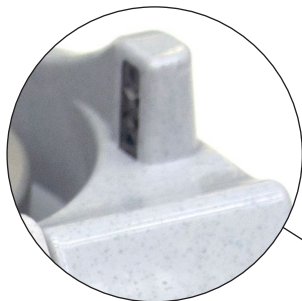

Czujnik poziomu wody

Monitoruje wnętrze komory nawilżającej i uruchamia alarm, gdy woda jest poniżej minimalnego lub maksymalnego poziomu.



Ekran dotykowy 4,3 cala

Zapewnia dostęp do wszystkich funkcji i informacji.

Kolorowe złącza kabli
Łatwy montaż

Port MDI

Dla bardziej efektywnego, szybkiego i wygodnego podawania leków.

Bez ftalanów

Materiały przyjazne dla środowiska i zdrowia.

Wzmocniony obwód oddechowy

Niska podatność
Niskie opory
Brak karbowania wewnątrz obwodu
Lepsze działanie w wentylacji HFO

Hydraltis
9500FM

Nowy wybór w aktywnym nawilżaniu



Hydraltis 9500FM jest idealny dla dorosłych, dzieci oraz noworodków. Przeznaczony zarówno do inwazyjnej oraz nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w tym tlenoterapii wysokoprzepływowej (High-Flow).

Hydraltis 9500FM jest prosty i łatwy w obsłudze. Przyjazny, wielojęzyczny interfejs jest łatwo dostępny przez czytelny, duży ekran dotykowy LCD, który zapewnia dostęp do wszystkich funkcji i informacji.

Operator może w każdej chwili dostosować temperaturę po stronie komory, temperaturę po stronie pacjenta i wilgotność w zależności od terapii i potrzeby komfortu pacjenta.


Hydraltis 9500FM posiada wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa, które zapobiegają niebezpiecznemu przegrzaniu się urządzenia w przypadku zatrzymania przepływu gazu lub nagłych zmian środowiska. Obejmuje to również specjalne algorytmy zapobiegające gromadzeniu się kondensatu w obwodzie oddechowym.

Hydraltis 9500FM może być używany z pełną gamą obwodów oddechowych z podgrzewanym przewodem o średnicy 15 i 19 mm, zaprojektowanych specjalnie przez DEAS.

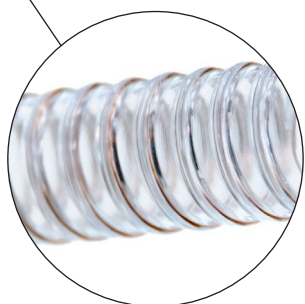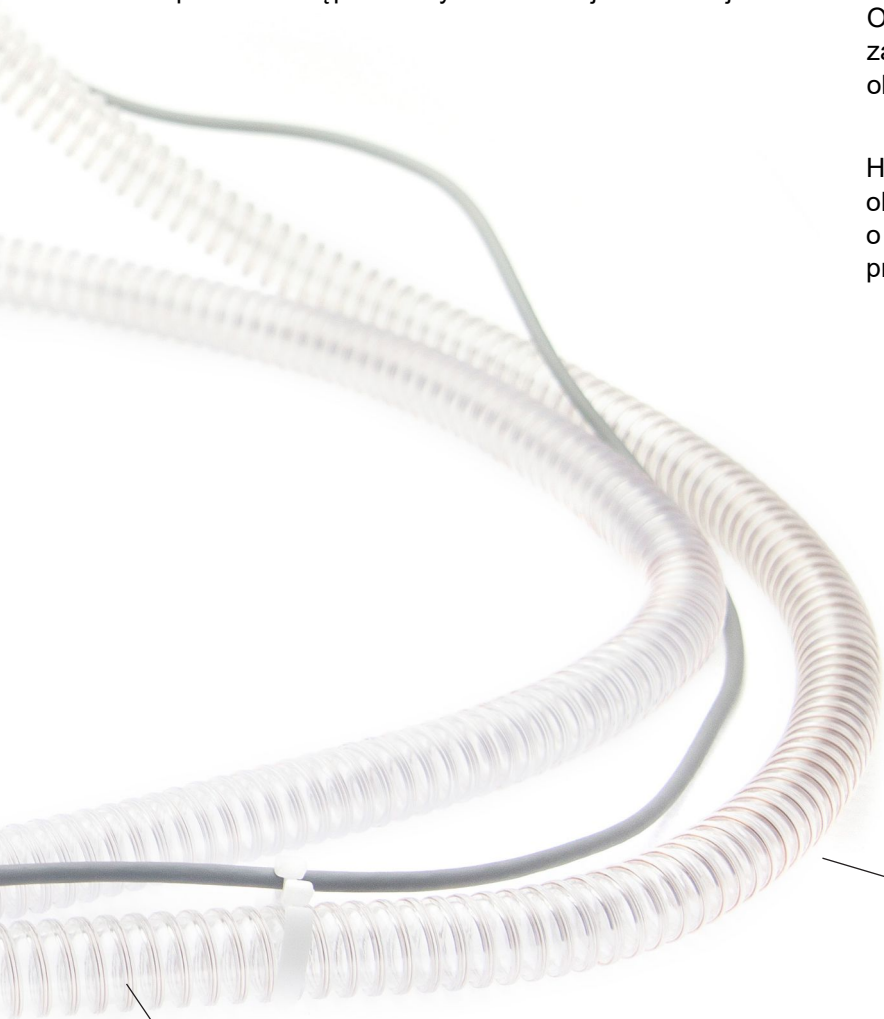

Współwytłaczany przewód grzewczy

Optymalne, równomierne podgrzewanie układu zapobiega kondensacji wody.

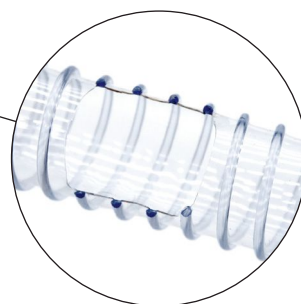

Gładka rurka obwodu

Zmniejszona turbulencja przepływu wewnętrznego i stagnacji wody, która może prowadzić do namnażania bakterii.


Ulepszona funkcjonalność dla lepszej opieki nad pacjentem

Hydraltis 9500FM jest prosty i łatwy w obsłudze. Przyjazny interfejs jest dostępny w jednym z 13 języków przez czytelny, duży ekran dotykowy LCD, który zapewnia dostęp do wszystkich funkcji i informacji.




Prosta, precyzyjna kontrola temperatury

Hydraltis optymalizuje terapię, komfort i bezpieczeństwo pacjenta niezależnie od zmian warunków otoczenia.

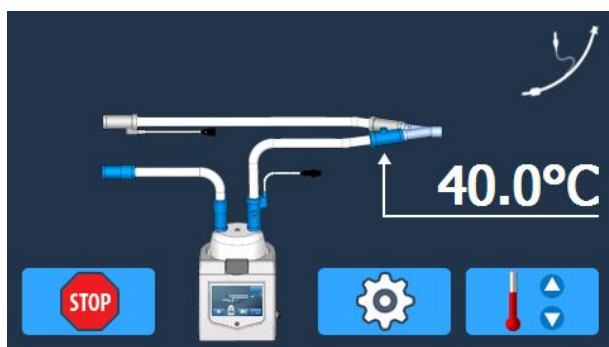


Jeden ekran dla wszystkich funkcji

Przerwanie nawilżania, dostęp do menu ustawień, regulacja temperatury.

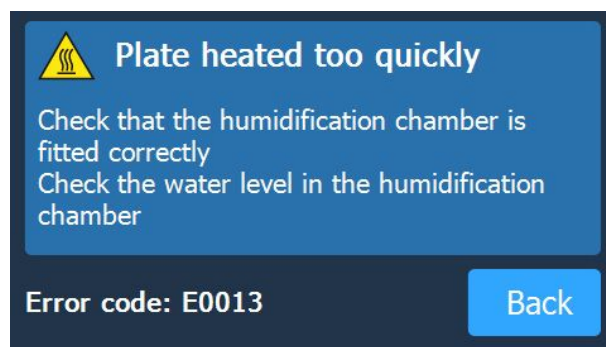


Wielojęzyczny opis alarmów

Operatorzy mogą przeczytać opis zagrożenia powodującego alarm oraz rozwiązania tych problemów.

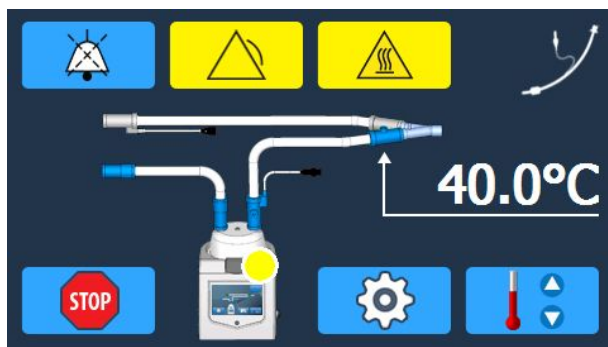

Wizualne i akustyczne alarmy

Inteligentny system alarmowy stale monitoruje działanie nawilżacza.

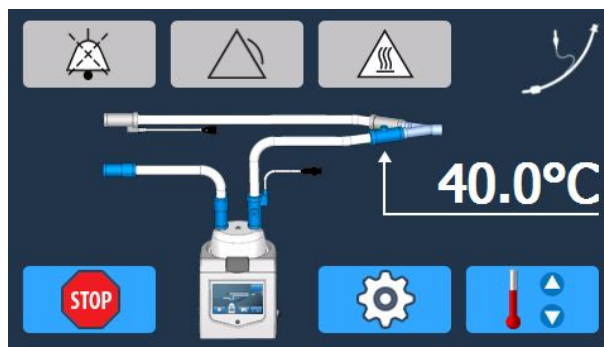

Alarmy bez zapętleń

Zmniejszenie zmęczenia personelu dzięki alarmom wyciszczanym automatycznie, gdy tylko przyczyna ich uruchomienia zniknie.

DEAS

DEAS srl
via dell'Industria, 49
48014 Castel Bolognese [RA]
Italy



Autoryzowany
przedstawiciel i serwis w Polsce
AMKO-MED SP. Z O.O.
ul. Księcia Witolda 49 lok. 15
50-202 Wrocław, Polska

Tel.: +48 605 308 926
Tel.: +48 605 308 224
E-mail: kontakt@amko-med.pl
www.amko-med.pl