



AQUANEA

Wanna do automatycznego hydromasażu strefowego

wysokiej klasy armatura

GROHE
ENJOY WATER



PERFECT
LINE
2009
sp. z o.o.

9 niezależnych stref
hydromasażu

kąpiel perełkowa

chromoterapia

elektroniczny panel
sterowania

anatomicznie
wyprofilowane wnętrze



REHABILITACJA
2008



EDYCJA XIV 2008
MEDAL
EUROPEJSKI



Posiadamy system
zarządzania jakością
ISO 9001: 2008
ISO 13485: 2003

AQUANEA

ODNOWIENIE WODĄ

Wanna do automatycznego hydromasażu strefowego to połączenie najnowszej technologii, nowoczesnego designu z ergonomią kształtów.

Możliwości zabiegowe:

- hydromasaż wirowy z użyciem 186 dysz
- kąpiel perełkowa przy zastosowaniu 60 dysz
- chromoterapia
- możliwość łączenia ze sobą kilku funkcji
- możliwość kąpieli z użyciem soli mineralnych, olejków i alg
- możliwość kąpieli perełkowej z ozonem

Cechy charakterystyczne:

- 186 dysz do hydromasażu bez podziału na strefy
- 60 dysz powietrznych do masażu perełkowego
- ozonator
- niezależna pompa powietrza
- nowoczesny, automatyczny system przepłukiwania i przedmuchiwania kanałów
- automatyczne napełnianie z termostatem
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
- innowacyjny system dezynfekcji i odkamieniania sterowany elektronicznie
- system usuwania wody z całej instalacji wanny
- wielofunkcyjny, kolorowy, elektroniczny panel sterowania
- 2 czujniki temperatury (pomiar przy napełnianiu wanny i podczas zabiegu)
- oszczędzający energię system odzyskiwania ciepła umożliwiający utrzymanie temperatury podczas zabiegu
- prysznic ciepły i zimny
- zagłówek
- stopnie do wanny

Opcje dodatkowe:

- **ZONES 9:** 9 niezależnych stref, 5 programów fabrycznych, 3 programy użytkownika
- **CHROMO 2R:** chromoterapia: 2 reflektory
- **CHROMO 4R:** chromoterapia: 4 reflektory
- **CHROMO 12:** chromoterapia: 12 pojedynczych źródeł światła
- **CHROMO 24:** chromoterapia: 24 pojedyncze źródła światła
- **CHROMO 36:** chromoterapia: 36 pojedynczych źródeł światła
- **AUDIO:** sterowanie zewnętrzne - możliwość podłączenia wieży, mp3 itp. Złącze MiniJack, łącze Bluetooth
- **AROMA:** zbiornik na 1 zapach, dozowanie podczas zabiegu za pomocą przycisku


Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania niecki wanny w innych kolorach (termin oraz koszt do indywidualnego ustalenia).



Niecka biała



Niecka calypso

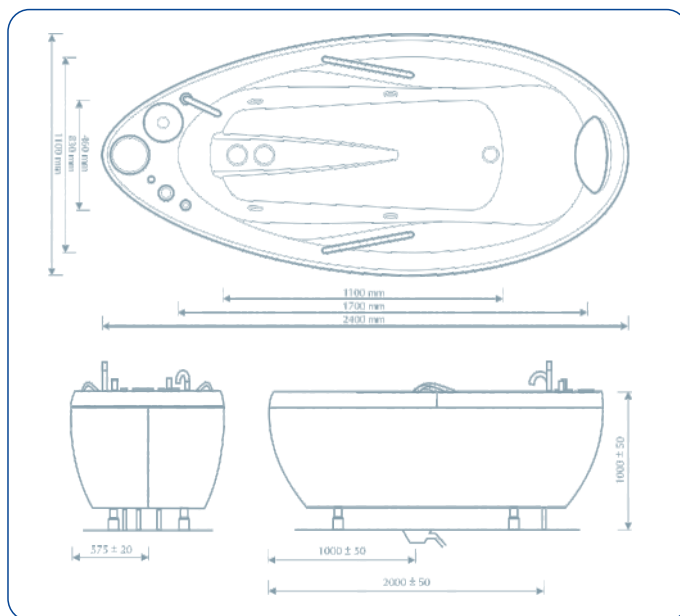

Stopień do wanny



Elektroniczny panel (Wyświetlacz LCD)



Zagłówek (biały)

DANE TECHNICZNE

Pojemność zabiegowa [l]:	160
Pojemność do przelewu [l]:	250
Czas napełniania / spustu [min]:	ok. 3
Pobór mocy [kW]:	max. 3,6
Zasilanie [V/Hz]:	trójfazowe 400/50
Wymiary (dł. x szer. x wys. [mm]):	2400 x 1100 x 1000
Masa [kg]:	220 - z pełnym wyposażeniem
Bezpieczeństwo elektryczne:	klasa I, typ B

Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania niecki wanny w innych kolorach (termin oraz koszt do indywidualnego ustalenia).