

# POLY CARE

FAUTEUILS DE SOINS & DIALYSE  
DIALYSIS & TREATMENT CHAIRS



L'alliance du confort et de la fonctionnalité  
A combination of comfort and functionality



## Funcionnalités – Functionality

Polycare peut être utilisé pour la dialyse, la transfusion sanguine, l'oncologie, la chimiothérapie et tout traitement nécessitant d'être assis et/ou allongé. Les roulettes Ø 125 avec ou sans freinage centralisé assurent une manoeuvrabilité aisée du fauteuil.

Polycare can be used for dialysis, transfusion, oncology, chemotherapy and any other treatment requiring the patient to be seated and/or laid down. The Ø 125 castors, with or without centralized brakes, ensure easy manoeuvrability of the chair.



Position d'accueil  
Welcome position



Position de soin  
Treatment position



Position allongée  
Extended position



Position décline  
Trendelenburg




3185

## Sécurité – Safety

La position de décline d'urgence (13° d'inclinaison) a été étudiée pour avoir les jambes plus élevées que la tête avec une inclinaison du dossier plus faible (3°) pour éviter tout glissement du patient. L'accumulateur intégré (option) assure un fonctionnement continu même en cas de débranchement ou de coupure de courant. La tige porte sérum (option), fixée sur la base reste en position quel que soit l'inclinaison du fauteuil. Les fauteuils, d'une très grande fiabilité sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité (structure acier avec finition époxy, visserie en acier inoxydable).

The Trendelenburg position (13° inclination) was designed to place patients legs higher than their head with a smaller backrest tilt (3°) to avoid patients slipping. The integrated actuator (option) ensures continuous operation even when unplugged or during a power cut. The IV pole (option), fixed to the base, remains in position regardless of the inclination of the chair. The treatment chairs are designed for long-term and reliable use and are manufactured with high quality materials (steel frame with epoxy finish, stainless steel screws).

## DIMENSIONS (mm)

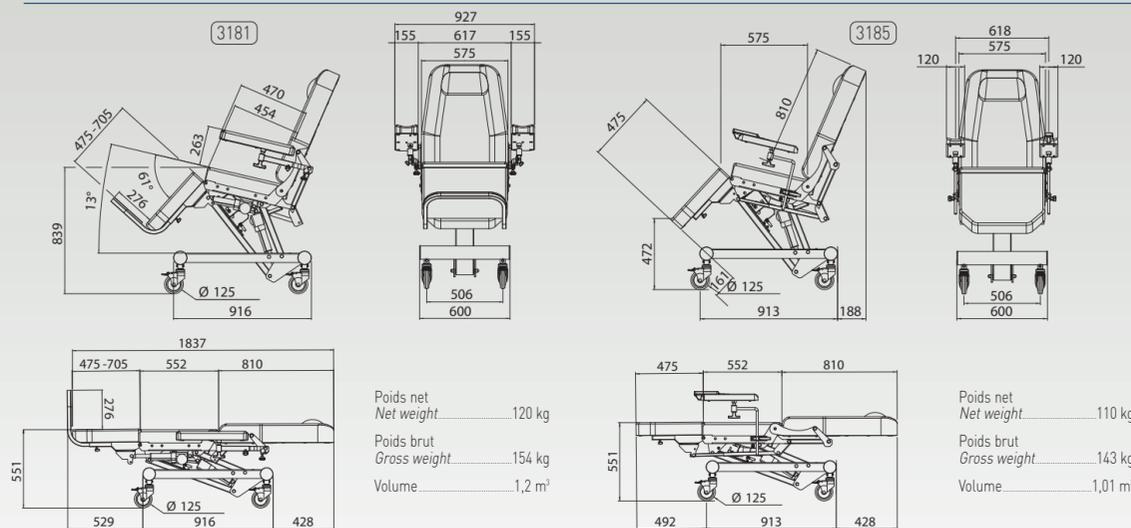

## CHOIX DES COULEURS DE SELLERIES - CHOICE OF UPHOLSTERY COLORS

### REVÊTEMENT NON-FEU M1 / M1 UPHOLSTERY

#### Basic



#### Trendy



#### Classic




#### Noirs



\* Non classé M1  
Not classified M1

### REVÊTEMENT RITTER\*\* RITTER UPHOLSTERY\*\*

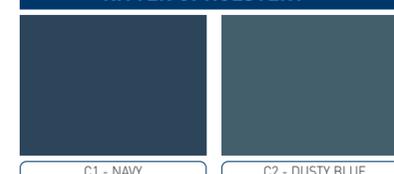

\*\* Uniquement pour certains produits de la gamme Promotal.  
Only for some products from Promotal range.



PROMOTAL - FRANCE | [www.promotal.com](http://www.promotal.com)



Copyright: J. B. Arts Médical - Dans un souci constant d'amélioration de nos matériels, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis - Our products are subject to improvement changes without prior notice.

## Confort - Comfort

Polycare assure un maximum de confort pendant le traitement. L'accès est facile pour le patient comme pour le personnel. Des vérins électriques silencieux et sans à coup permettent un positionnement précis, adapté à la recherche du confort optimal lors de procédures longues et douloureuses. Les accoudoirs réglables en hauteur, en rotation, en inclinaison et en longueur sont combinés au mouvement du dossier (modèle 3181) afin de garder contact avec l'avant bras quel que soit l'inclinaison du fauteuil. Ils sont entièrement escamotables pour faciliter un accès latéral au fauteuil. Le cale pied électrique option assure confort et autonomie au patient et permet au patient de se réajuster sur le fauteuil.

Polycare was developed to provide maximum comfort during treatment. Access is facilitated for patients and personnel alike. Silent electric motors allow smooth and precise positioning of the chair ensuring optimal comfort during long and painful procedures. The armrests can be adjusted in height, rotation and inclination (model 3181) in order to retain the same contact with the forearm regardless of the position of the chair. They can also be adjusted to facilitate access to the chair. The electric foot stop option is adjustable ensuring comfort and autonomy for the patient.



**3181**

+ options



Position d'accueil  
Welcome position



Position de soin  
Treatment position



Position allongée  
Extended position



Position décline  
Trendelenburg

## 3181 CARACTÉRISTIQUES STANDARD STANDARD FEATURES

Hauteur variable électrique  
Electric height adjustment

Dossier réglable par vérin électrique indépendant  
Electric independent backrest adjustment

Repose-jambes réglable par vérin électrique indépendant  
Electric independent legrest adjustment

Mouvement électrique combiné de l'inclinaison de l'assise et la hauteur variable  
Combined electric seat incline and height adjustment

Mouvement électrique combiné du dossier et des appui-bras  
Combined electric armrest and legrest movements

Cale-pieds réglable manuellement  
Manual footrest adjustment

Commande manuelle avec position d'urgence  
Hand control with emergency position

4 roulettes à freins ø 125 mm  
Set of 4 castors ø 125mm with brakes

Structure acier avec finition époxy gris nuage  
Steel frame with light grey epoxy finish

Sellerie avec mousse 80 mm grand confort  
Upholstery with 80mm thick foam

Poids maximum du patient autorisé 170 kg  
(testé en dynamique à 210 kg et en statique à 680 kg)  
170kg patient weight capacity  
(tested at a dynamic weight of 210kg and a static weight of 680kg)

## 3185 CARACTÉRISTIQUES STANDARD STANDARD FEATURES

Hauteur variable électrique  
Electric height adjustment

Mouvement électrique combiné du dossier et du repose-jambe  
Combined electric legrest and backrest movements

Mouvement combiné de l'inclinaison de l'assise et la hauteur variable  
Combined seat incline and height adjustment

Commande manuelle  
Hand control

Paire d'appui-bras réglable en polyuréthane noir sur rotule  
Pair of adjustable polyurethane armrests on ball & socket joint

4 roulettes à freins ø 125 mm  
Set of 4 castors ø 125mm with brakes

Structure acier avec finition époxy gris nuage  
Steel frame with light grey epoxy finish

Sellerie avec mousse 80 mm grand confort  
Upholstery with 80mm thick foam

Poids maximum du patient autorisé 170 kg  
(testé en dynamique à 210 kg et en statique à 680 kg)  
170kg patient weight capacity  
(tested at a dynamic weight of 210kg and a static weight of 680kg)

## MODÈLES - MODELS

Modèles Models	Hauteur variable électrique Electric height adjustment	Dossier électrique indépendant Independent electric backrest	Repose-jambes électrique indépendant Independent electric legrest	Dossier & repose-jambe combinés électriques Combined electric backrest & legrest	Inclinaison d'assise et hauteur variable combinées Combined seat incline & height adjustment	Dossier & appui-bras combinés Combined armrest & backrest	Cale-pied manuel Manual footrest	Cale-pied électrique Electric footrest
3181	●	●	●		●	●	●	option
3185	●			●	●	option	option	

Modèles présentés avec options - Products shown with options

## ACCESSOIRES - ACCESSORIES



Appui-tête réglable  
Adjustable headrest



Housse pour appui-bras (modèle 3185)  
Covers for armrest (model 3185)



Support télécommande flexible avec fixation  
Flexible hand control support with clamp

## OPTIONS SPÉCIFIQUES - SPECIFIC OPTIONS



Cale-pied réglable manuellement  
(modèle 3185)  
Adjustable manual footrest  
(model 3185)



Appui-bras combinés au dossier  
& relevables (modèle 3185)  
Adjustable, combined armrest  
with backrest (model 3185)



Cale pied électrique avec dispositif  
de rallonge manuel de 50 mm (modèle 3181)  
Electric footrest adjustment with manual  
mechanism for additional 50mm (model 3181)



Accumulateur pour mouvement d'urgence  
(modèle 3181)  
Actuator for emergency positioning  
(model 3181)

## OPTIONS COMMUNES - COMMON OPTIONS



Protection plastique pour repose-jambes  
Plastic protection for legrest



Barre de poussée  
Push bar



4 roulettes ø 125 avec freinage centralisé  
Set of 4 castors ø 125mm  
with centralized brakes



Tablette de lecture inclinable et escamotable  
Adjustable & removable reading tray



Paire d'étau pour tablette réf 25350  
Pair of clamps for tray ref 25350



Tige porte-sérum 2 crochets inox, télescopique  
Stainless steel telescopic, 2 hook, IV pole