

Ssak ręczny V-VAC dzięki swojej wysokiej wydajności i prostocie użytkowania stanowi idealne rozwiązanie dla wszystkich służb ratunkowych.



Właściwości ssaka V-VAC:

- możliwość szybkiego przestawienia na duże bądź małe podciśnienie (dla dzieci)
- wysoka wydajność: podciśnienie ponad 380 mmHg, najwyższy przepływ ponad 70 l/min
- unikalna konstrukcja końcówki ssącej będącej jednocześnie zastawką
- możliwość podłączenia cewnika
- wymienny, jednorazowy zbiornik stanowiący równocześnie pompę, pojemnik na treści i przewód ssący
- łatwy w czyszczeniu uchwyt wielokrotnego użytku

Dostępne warianty ssaków V-VAC:

98 50 00 V-VAC Starter Kit - zestaw startowy

98 51 00 V-VAC Training Kit - zestaw szkoleniowy

Zestaw V-VAC Starter Kit zawiera:


- uchwyt
- 2 wymienne jednorazowe zbiorniki
- krótki cewnik ssący z końcówką
- łącznik
- instrukcję obsługi



Ssak V-VAC z łatwością zmieści się do większości zestawów ratowniczych. Osobna torba jest również dostępna.

Zestaw V-VAC Trainer Kit zawiera:

- uchwyt
- wymienny zbiornik z korkiem do opróżniania
- krótki cewnik ssący z końcówką
- łącznik
- instrukcję obsługi

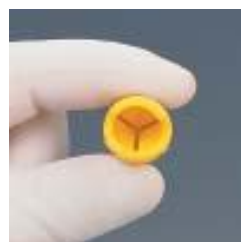

Mięka końcówka przewodu ssącego ma głębokie nacięcia zapobiegające uszkodzeniu miękkich tkanek podczas przykładania jej do tylnej ściany gardła. Trójdzielna zastawka zatrzymuje powrót wydzieliny.

Akcesoria dostępne do ssaka V-VAC:

98 50 01 Replacement Cartridge - wymienny, jednorazowy pojemnik

98 51 01 Training Cartridge - pojemnik szkoleniowy z korkiem

98 52 00 Carrying Bag (yellow) - żółta torba do ssaka

98 50 02 Adapter Tip - końcówka ssąca (op. 4 szt.)

98 50 03 Double Male Connector - łącznik (op. 10 szt.)

98 50 04 Short Suction Catheter (8"/18 F) - cewnik (op. 4 szt.)

98 50 30 Replacement Handle - uchwyt



LMP Sp. z o.o.

ul. Kolisty 25

40-486 Katowice

tel: 32 735 04 61

fax: 32 735 03 14

lmp@lmp.pl

Oddział Poznań
tel. 61 899 82 01
poznan@lmp.pl

Oddział Białystok
tel. 85 710 44 35
bialystok@lmp.pl

Region Gdańsk
tel. 601 29 09 17
gdansk@lmp.pl

Region Warszawa
tel. 721 32 78 80
warszawa@lmp.pl

Region Wrocław
tel. 601 21 83 01
wroclaw@lmp.pl

www.lmp.pl