


S551

55" Chirurgiczny monitor medyczny 8MP

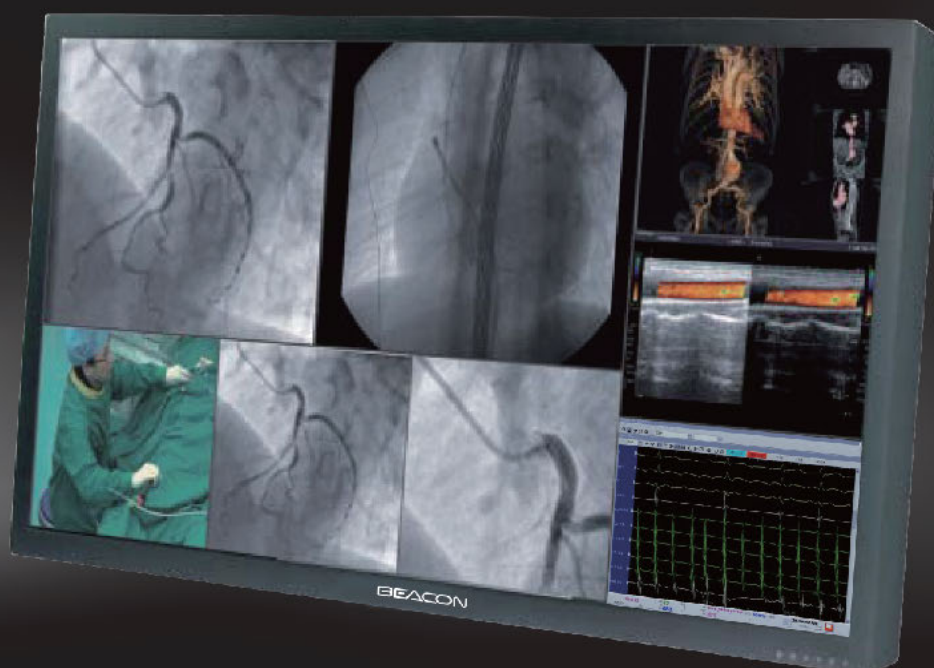

55" Chirurgiczny monitor medyczny 8MP

Monitor jest skalibrowany ściśle ze standardem DICOM tak, aby zapewnić dokładne i spójne wyświetlanie szczegółowych i precyzyjnych obrazów medycznych. Jest powszechnie stosowany w salach operacyjnych, przy nauce chirurgii i kompleksowych szkoleniach oraz innych dziedzinach medycyny. Wielkoformatowy monitor S551 cechuje obsługa 12 kanałów wejścia sygnału wideo, możliwość podłączenia i wyświetlania wielu sygnałów wideo jednocześnie z rozdzielczością do 8 Mega Pikseli (3840 x 2160 @ 60Hz pikseli), podział obrazu na 8 okien wyświetlanych w tym samym czasie. Ponadto wejścia wideo można przełączać swobodnie na dowolne okna, używać różnych krzywych gamma, wielu kontrastów i temperatur barwowych a także niezależnie regulować ich jasność. Uniwersalne wejścia takie jak RS232, IR (podczerwień) służą do konfiguracji parametrów wyświetlania na wielu oknach. Wszystkie te cechy czynią monitor doskonałym wyświetlaczem obrazów medycznych lub informacji z systemu zdalnego DSA, systemu PACS, systemów konsultacji, i innych źródeł obrazu. Wbudowany system stabilizacji jasności podświetlenia matrycy może osiągnąć optymalne warunki pracy szybko po uruchomieniu i zapewnić stałą wydajność w długotrwałym użytkowaniu.


BEACON

S551

55" Chirurgiczny monitor medyczny 8MP

Zastosowanie

- Zintegrowane sale operacyjne
- Nauka i trening chirurgii

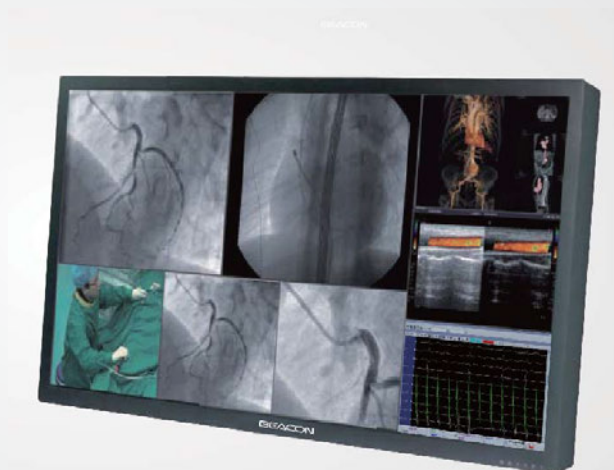

Specyfikacja techniczna



Zgodność ze standardem DICOM



Wbudowane tryby wyświetlania wielu ok5" ChCobraz"i



Wiele wejść sygnału



Ultra niskie opóźnienia przetwarzania wideo



Szerokie kąty widzenia

Model	S551
Rozmiar	55"
Głębia koloru	1,07 Miliardów
Rozdzielczość	3840 x 2160
Rozmiar pixela	0,315 mm x 0,315 mm
Jasność	700 cd / m ²
Kontrast	1400 : 1
Kąty widzenia	178° pion / 178° poziom
Czas reakcji	10 ms
Wejścia sygnału	DisplayPort: 20pin*4 DVI-D: 24 pin*4 CVBS: BNC*3 VGA: D-Sub 15 pin
Wymiary	1272 (Szer.) x 754 (Wys.) x 100 (Głęb.) mm
Masa własna	40 kg
Zasilanie	AC 230 V
Pobór mocy	maksymalnie 350 W
Oszczędzanie energii	EPA, VESA
MTBF	> 50 000 godzin

BEACON

www.beacon-display.pl

CONNECT Sp. z o. o.

ul. Pejażowa 2 / 615
02-703 Warszawa

tel. +48 22 717 33 29
e-mail: handlowy@connect.pl

Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.