

F2**Monitor płodu****Pozycjonowanie**

Wózek

Fmocowanie
ścienne**Specyfikacja**

Charakterystyka fizyczna		Specyfikacja wyświetlacza:	
Wymiary:	350mm x 300mm x 104mm	Wyświetlacz:	5,6" LCD
Waga:	około 3 kg	Rozdzielczość:	640 (W)*480 (H)
Głowica US		DECG	
Technika:	Doppler pulsacyjny z automatyczną korelacją 2KHz	Technika:	Detekcja szczyt-szczyt
Prędkość powtarzania pulsu:		Zakres pomiaru bezpośredniego tętna płodu:	30bpm ~ 240bpm
Częstotliwość próbkowania:	1.0MHz ±10%	Rozdzielczość:	1bpm
Zakres pomiaru tętna płodu:	50bpm - 240bpm	Dokładność:	+/- 1 bpm
Rozdzielczość:	1bpm		
Dokładność:	+/-2bpm		
/ob:	<10mW/cm ²		
TOCO		IUP	
Zakres TOCO:	0%-100%	Zakres ciśnienia:	0 ~ 100mmHg
Błąd nieliniowości:	<10%	Błąd nieliniowości:	< +3mmHg
Rozdzielczość:	1%	Rozdzielczość:	1%
Zerowanie:	Automatyczny / Manualny	Zerowanie:	Automatyczne/Manualne
AFM		Ręczny znacznik ruchów płodu	
Technika:	Doppler pulsacyjny	Metoda	Zdalny znacznik
Zakres:	0-100 (%)		
Rozdzielczość:	1%		
Zasilanie		Rejestrator	
Napięcie:	100 -240V	Papier rejestracyjny:	Papier termoczuły w ryzach, 150/152mm
Częstotliwość prądu:	50/60Hz	Prędkość rejestracji:	1/2/3cm/min, 15mm/s dla danych historycznych
Bateria:	Akumulatorowa 14.8V/4400mAh litowo-jonowa		

EDAN**F2****Monitor płodu****EDAN** Edan Instruments, Inc.

3/F - B, Nanshan Medical Equipment Park, Nanshan Rd 1019#, Shekou, Nanshan Shenzhen, 518067 P.R. China
 ■ Tel: +86-755-26898326 ■ Fax: +86-755-26898330 ■ www.edan.com.cn ■ Email: info@edan.com.cn
 ■ Wszelkie prawa zastrzeżone. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.



ENG-CTG-F2-V1.0-20120209

Care for Health

EDAN

F2



Dzięki eleganckiemu wyglądowi, jasnym kolorom wyświetlacza i wzmocnionej funkcjonalności monitor F3 spełnia wymogi oddziałów położniczych w klinikach i szpitalach. F3 jest niespodziewanie lekki i przenośny, co czyni go przydatnym w zastosowaniach ambulatoryjnych. Dzięki najnowszej technologii firmy EDAN, F3 oferuje możliwość monitorowania wachlarza parametrów, takich jak FHR, TOCO, DECG, IUP i ruchów płodu.


< Wiele trybów prezentacji danych



Dzięki przełączaniu się między trybami wyświetlania użytkownik może wybrać najodpowiedniejszy dla danej sytuacji klinicznej.



Prosty obieg danych

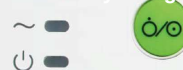

START SILENCE AUTO ZERO MARK PRINT CHANNEL

Obsługa jednym pokręteł:

Używając tylko pokręta użytkownik może przeprowadzić całą konfigurację w celu przystosowania aparatu do aktualnej sytuacji klinicznej

Obsługa jednym klawiszem

Klawisz START można skonfigurować, aby zintegrować dane pacjenta i wydruk. Ta czynność może pomóc uprościć pracę lekarza i umożliwić mu pracę tylko z jednym przyciskiem.

< Wodoodporny przetwornik FHR o częstotliwości 1 MHz



Wykorzystanie głowicy o częstotliwości 1MHz powiększa penetrację i pogłębia detekcję, co ma znaczący wpływ na jakość monitorowania zwłaszcza dużych ciężarnych pacjentek. Co więcej, im niższa częstotliwość przetwornika, tym lepsza ochrona tkanek płodu.

Wygodny w przenoszeniu i transporcie

- Kompaktowy, przenośny i lekki (waga około 3kg)
- Bateria litowo-jonowa o dużej pojemności dla monitorowania pacjentów poza kliniką

Łatwy w odczycie i obsłudze

- Składany kolorowy ekran TFT o przekątnej 5,6"
- Duży wyświetlacz danych numerycznych i trendów
- Prosty obieg danych, silikonowe przyciski obsługi

Zaawansowana technologia detekcji FHR

- Weryfikacja nakładających się sygnałów ciąży bliźniaczej
- Wskaźnik jakości sygnału pomagający optymalizować pozycję przetwornika

Różne opcje drukowania

- Wbudowana drukarka termiczna
- Wydruk na papierze o szerokości 150/152 mm
- prędkość drukowania 1/2/3/ cm/min w czasie rzeczywistym
- Szybkie drukowanie 15 mm/s danych historycznych

Wszechstronne zarządzanie danymi

- Wbudowana pamięć 12 godzin dla bezszwowego monitoringu
- Sieć MFM-CNS ze zdalnym monitoringiem
- Oprogramowanie *Insight* do zarządzania danymi na komputerze
- Port USB dla powiększenia możliwości archiwizacyjnych

