

Dräger Vapor 3000 / D-Vapor 3000

Nowoczesny parownik z inteligentnymi funkcjami

Nowy parownik Vapor 3000 to znacznie więcej niż zbiornik na anestetyk — jest teraz jeszcze skuteczniejszy, zwłaszcza w ciemnym otoczeniu. W połączeniu ze stanowiskiem do znieczulania Perseus A500 ułatwia monitorowanie i planowanie znieczulenia, zwiększając przy tym efektywność pracy.



NOWE FUNKCJE ZWIĘKSZAJĄ BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT PRACY

Vapor 3000 posiada cechy znane z poprzednich modeli: funkcja transportowa, duża objętość napełnienia (300 ml) i akustyczne alarmy poziomu napełnienia. Dodatkowo jest wyposażony w zaawansowane funkcje, które pomagają prowadzić znieczulenie z większą, niż kiedykolwiek wcześniej, pewnością. Oprócz możliwości bezpiecznego przechowywania i aplikacji wszystkich aktualnie stosowanych środków wziewnych, wyposażony jest również w szczelny korek z funkcją szybkiego otwierania oraz podświetlenie skali i poziomu napełnienia. Na pokrętle kontrolnym dostępne jest ustawienie „wyt.” (0) i ustawienie transportowe (T). Urządzenia serii Vapor 3000 mogą się również komunikować z nowym stanowiskiem do znieczulania Perseus A500.


KOMUNIKACJA ZE STANOWISKIEM PERSEUS A500

Oprócz przekazu ustawień pokręta kontrolnego, alarmów i identyfikacji anestetyku, urządzenia Vapor 3000 mogą dostarczać do stanowiska do znieczulania Perseus

A500 informacje, które mogą zostać wykorzystane do prognozowania stężenia anestetyku w przedziale do 20 minut. Prognozowanie wdechowego i wydechowego stężenia środków wziewnych może pomagać podczas znieczulania przy niskich i minimalnych przepływach, czyniąc proces bardziej efektywnym i ekonomicznym w odniesieniu do większych grup pacjentów lub określonych przypadków klinicznych.


ZAAWANSOWANE MODELOWANIE I WIZUALIZACJA DANYCH – PERSEUS A500

Prognozy oparte są na zaawansowanych modelach matematycznych, uwzględniających szeroki zakres zmiennych. Wizualizacja prognoz i symulacja danych mogą pomóc anestezjologom w dopracowaniu czynności, zwiększając efektywność oraz poziom bezpieczeństwa pacjenta. Nadają się idealnie do celów szkoleniowych oraz innych sytuacji, wymagających specjalnej opieki.

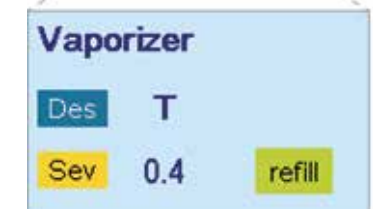

Komunikacja ze stanowiskiem Perseus A500

Identyfikacja parownika, ustawienie 0.4 na pokrętle kontrolnym i przypomnienie o konieczności uzupełnienia anestetyku. Parownik desfluranu jest ustawiony w pozycji 'T'.

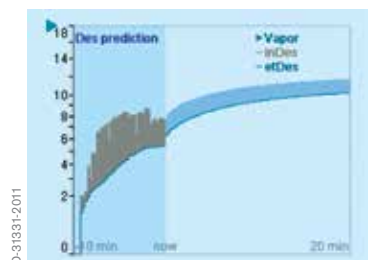

Zaawansowane modelowanie i wizualizacja danych przy użyciu stanowiska do znieczulania Perseus A500

Faza indukcji: stężenie desfluranu 18% obj., przepływ świeżego gazu 0,3 l/min.



PODŚWIETLANE WSKAŹNIKI USTAWIONEGO STĘŻENIA I POZIOMU NAPEŁNIENIA

Parowniki Vapor 3000 są teraz wyposażone w zintegrowane podświetlenie pokrętki kontrolnego i wskaźników poziomu napełnienia. Zapewnia to szybką ocenę podawanego stężenia oraz poziomu napełnienia nawet w ciemnym otoczeniu, bez potrzeby użycia dodatkowych źródeł światła. Wskaźnik poziomu jest większy i dodatkowo

wyposażony w niebieski pasek, co zapewnia wyrównany odczyt i lepszą widoczność z dalszej odległości.

BRAK KONIECZNOŚCI PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH I REKALIBRACJI

Parowniki Vapor 3000 nie tylko są bezpieczne i łatwe w użyciu, nie wymagają także przeglądów konserwacyjnych oraz rekalkulacji. Solidne wykonanie to gwarancja długiej i bezproblemowej eksploatacji.



Ulepszony korek uszczelniający i jego obsługa

Do otwarcia i zamknięcia wlewu wystarczy obrót o 90°, uchwyt korka ustawiony w poziomie oznacza — otwarty, a w pionie — zamknięty. Dzięki temu wystarczy jedno spojrzenie aby stwierdzić, czy wlew jest uszczelniony.



CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy

www.draeger.com

POLSKA
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
85 - 655 Bydgoszcz
Tel +48 52 346 14-33 (-34, -35)
Fax +48 52 346 14-37
info.polska@draeger.com

Producent:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt

