

Maski totalno-twarzowe ClassicStar® NIV


Akcesoria i materiały eksploatacyjne

Maski totalno-twarzowe ClassicStar® NIV przeznaczone do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej. Obejmują usta, nos i oczy pacjenta, zapewniając skuteczną terapię, również w przypadku, gdy pacjent oddycha ustami.



D-28635-2015

ClassicStar® SE
(ze standardowym kolankiem)
Niebieski kolor kolanka wskazuje, iż maska nie jest wyposażona w zawór AAV ani otwory wydechowe.

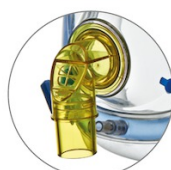

D-28646-2015

ClassicStar® AAV
(z zaworem przeciwasfiksyjnym)
bez otworów wydechowych
Żółte kolanko zawiera zawór AAV, który zapewnia dostęp do powietrza otaczającego pacjenta, w przypadku niskiego ciśnienia (< 3 cm H₂O).



D-28645-2015

ClassicStar® AAV
(z zaworem przeciwasfiksyjnym)
Przezroczyste kolanko zawiera zawór AAV, który zapewnia dostęp do powietrza otaczającego pacjenta, w przypadku niskiego ciśnienia (< 3 cm H₂O). Otwory wydechowe zapewniają właściwe wydalanie CO₂ podczas wentylacji nieinwazyjnej.

Zalety

Maski totalno-twarzowe ClassicStar® NIV

Maska totalno-twarzowa ClassicStar nie dotyka powierzchni nosa, ponieważ jej uszczelnienia opierają się na mniej wrażliwych na ucisk i bardziej opływowych częściach twarzy. Również w przypadku pacjentów z deformacjami twarzy maska totalno-twarzowa jest najlepszym wyborem.

- Maska ClassicStar NIV wyposażona jest w poduszkę wypełnioną powietrzem, dzięki której może być indywidualnie dopasowana do twarzy pacjenta. Wielkość poduszki może być zmieniana przy pomocy dwustronnej pompki do regulacji ciśnienia powietrza. Ze względu na łatwość dopasowania, maska ClassicStar NIV zapewnia większą wygodę użycia oraz skuteczne uszczelnienie.
- Duża powierzchnia poduszki umożliwia równomierny nacisk na skórę, co eliminuje podrażnienia.
- System mocowania z dodatkową opaską w górnej części maski gwarantuje jej stabilność, dzięki czemu maska nie przesuwa się i nie uciska nadmiernie na twarz pacjenta.
- Wbudowane zatrzaski pozwalają na szybkie zdjęcie maski.
- Kolanko maski ClassicStar NIV może być obracane o 360 stopni. W modelu SE kolanko można dodatkowo przesuwać w płaszczyźnie pionowej, co zapewnia większą elastyczność.
- Wszystkie maski ClassicStar NIV są przeznaczone do jednorazowego użytku.

Informacje zamówieniowe

ClassicStar® SE	Opakowanie	Numer katalogowy
Maska totalno-twarzowa ClassicStar® NIV, standardowe kolanko, do jednorazowego użytku, rozmiar S	1 szt.	MP02910
Maska totalno-twarzowa ClassicStar® NIV, standardowe kolanko, do jednorazowego użytku, rozmiar M	1 szt.	MP02911
Maska totalno-twarzowa ClassicStar® NIV, standardowe kolanko, do jednorazowego użytku, rozmiar L	1 szt.	MP02912
ClassicStar® AAV		
Maska totalno-twarzowa ClassicStar® NIV, zawór przeciwasfiksyjny (AAV), do jednorazowego użytku, rozmiar S	1 szt.	MP02913
Maska totalno-twarzowa ClassicStar® NIV, zawór przeciwasfiksyjny (AAV), do jednorazowego użytku, rozmiar M	1 szt.	MP02914
Maska totalno-twarzowa ClassicStar® NIV, zawór przeciwasfiksyjny (AAV), do jednorazowego użytku, rozmiar L	1 szt.	MP02915
ClassicStar® AAV (bez otworów wydechowych)		
Maska totalno-twarzowa ClassicStar® NIV, zawór przeciwasfiksyjny (AAV), bez otworów wydechowych, do jednorazowego użytku, rozmiar S	1 szt.	MP02916
Maska totalno-twarzowa ClassicStar® NIV, zawór przeciwasfiksyjny (AAV), bez otworów wydechowych, do jednorazowego użytku, rozmiar M	1 szt.	MP02917
Maska totalno-twarzowa ClassicStar® NIV, zawór przeciwasfiksyjny (AAV), bez otworów wydechowych, do jednorazowego użytku, rozmiar L	1 szt.	MP02918

Notatki

CENTRALA

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

Producent:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy

POLSKA

Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
85 - 655 Bydgoszcz
Tel +48 52 346 14-33 (-34, -35)
Fax +48 52 346 14-37
info.polska@draeger.com

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt

